


DIRI

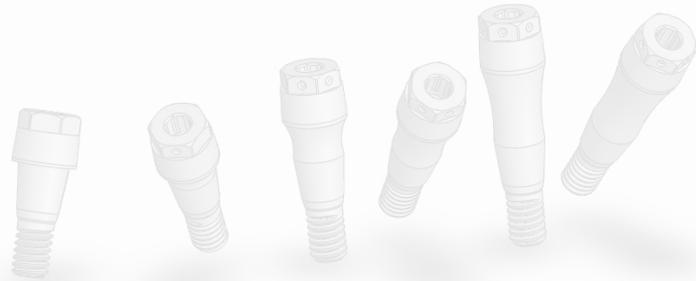

SelfConnect concept

Caso Clínico:

Exodontia dos dentes 11, 21 e 22

Colocação de 3 pilares SC

Colocação de 3 Cilindros Cicatrizadores Anatômicos

Dia seguinte, Colocação de 3 Cilindros Protéticos

3 dentes provisórios



DIRI



Exodontia atraumática conservando os tecidos moles e duros.



D IRI



Instalação de implantes
e pilares SC.



D IRI



Enxerto ósseo e colocação de cilindros cicatrizadores anatômicos.



D IRI




No dia seguinte, remoção dos cilindros cicatrizadores para confecção das coroas provisórias.



DIRI



No dia seguinte, remoção dos cilindros cicatrizadores para confecção das coroas provisórias.

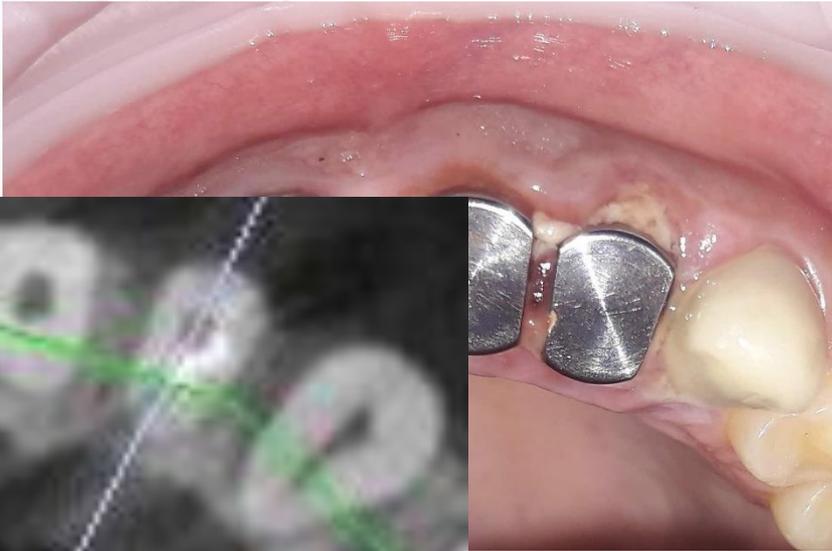

DIRI



Enceramento e matriz de silicone copiando a face vestibular dos dentes.



DIRI



Confeção de facetas com resina composta.



DIRI



Aplicação de opaco nos cilindros protéticos e instalação dos mesmos sobre o pilar SC.



DIRI



Prova da matriz de silicone em boca.



DIRI



Captura e transferência das facetas para os cilindros protéticos com resina flow ativada em boca..

Usar resina flow novamente para copiar a cervical e fechar os espaços.



D IRI



Remoção das coroas para finalizar fora da boca.



D IRI




Coroas finalizadas com adiç3o de resina flow.
Acabamento e polimento final.



D IRI




Colocação das coroas em boca..

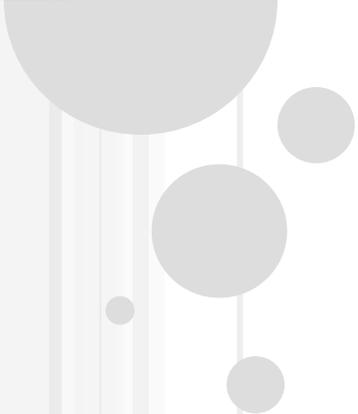

DIRI



Ativação da força friccional para fixação final com martelete de ponta acrílica aplicando 3 leves batidas.

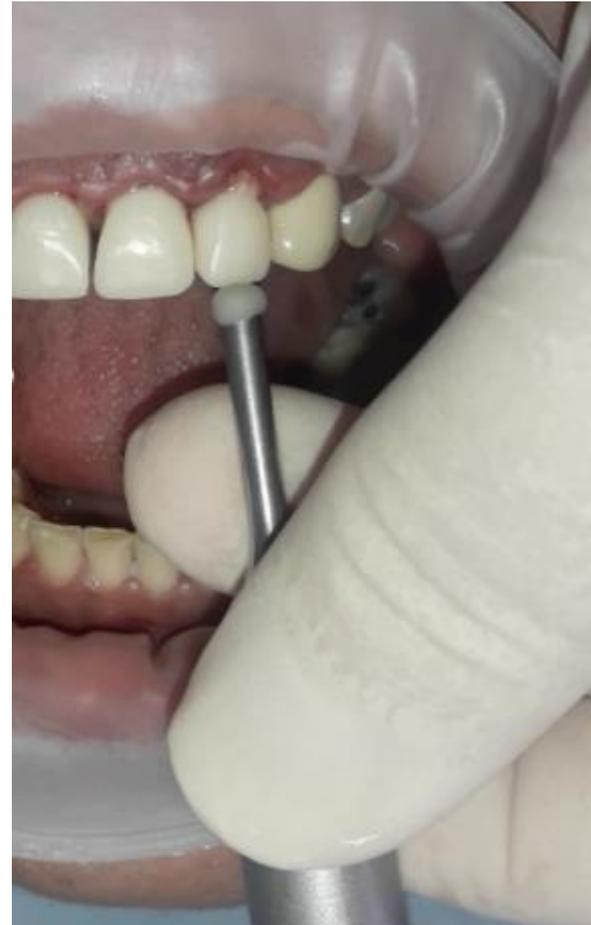

D IRI




Caso finalizado com coroas sem interferência oclusal.



DIRI



Caso finalizado com coroas sem interferência oclusal.

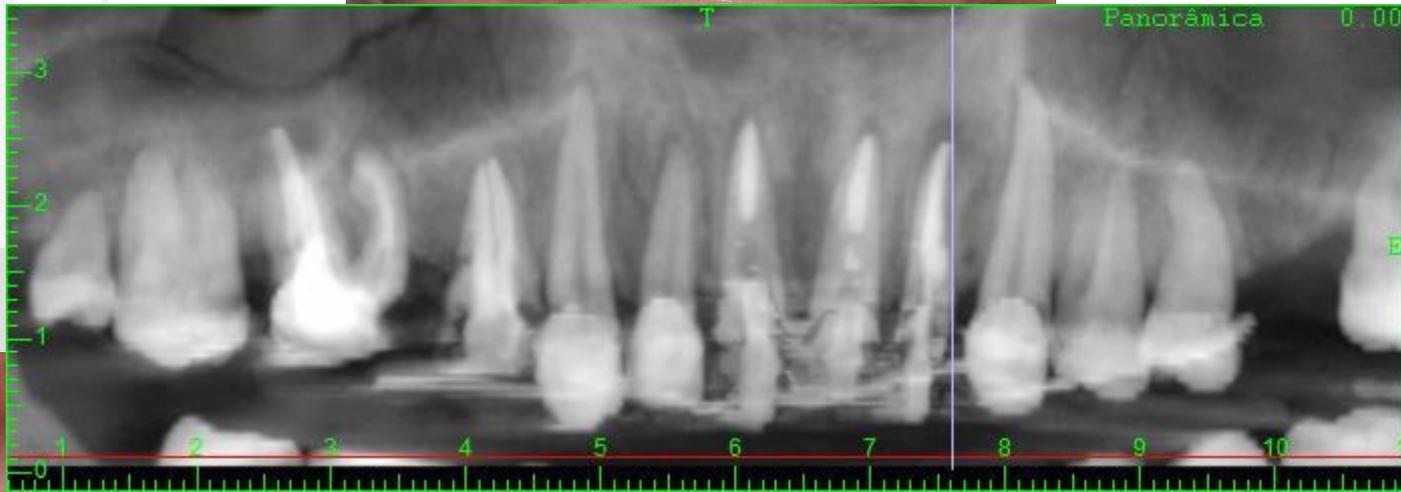

D IRI



Caso finalizado com coroas sem interferência oclusal.



D IRI



Caso finalizado com coroas sem interferência oclusal.

