

CATÁLOGO DE PRODUTO

COMPONENTES PARA IMPLANTE CM 11,5°





Politica da DIRI

Garantia: Permanente seguindo as instruções de uso.

Troca: A qualquer momento para produtos lacrados.

Pagamento: A vista 30% desconto.

Pedidos



+55 (85)9.8647-1010

9.9667-0202

Todas as Fotos São Ilustrativas

TAPA IMPLANTE

Chave Digital 1,2



★
10 N



Tamanho

Normal


Longo

Rosca interna especial para facilitar sua captura com auxílio da chave PCM mesmo com a presença de osso sobre o Tapa.



Chave PCM

Tapa implante da DIRI possui rosca interna especial para facilitar sua captura com auxílio da chave PCM mesmo com a presença de osso sobre o implante. A captura do tapa é atraumática, bem simples e dispensa o uso de brocas para remover o excesso do osso.

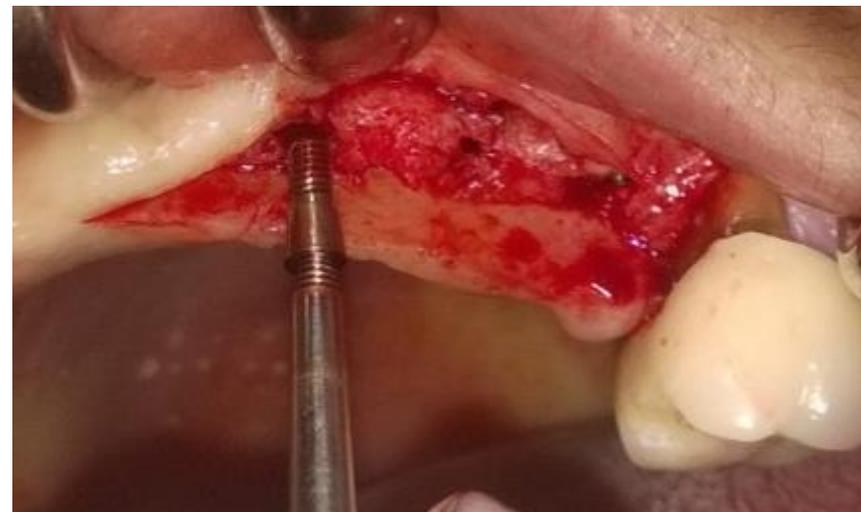

Colocação: Chave Digital 1,2 / Remoção: Chave Extratora PCM
Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio

Produto	Código	Preço
Tapa implante normal	500.03.00	R\$ 28,00
Tapa implante longo	501.03.00	R\$ 28,00

CICATRIZADOR

Os novos Cicatrizadores dos diâmetros 6,3 e 8,0 mm oferecem vedação periférica gengival perfeita nos casos de extração e colocação imediata.


Esses cicatrizadores são ideais para um perfil gengival nos dentes com diâmetro cervical grande.



Colocação: Chave Digital 1,2 / Remoção: Chave Digital 1,2
Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio

CICATRIZADOR

3,3 MM 4,5 MM

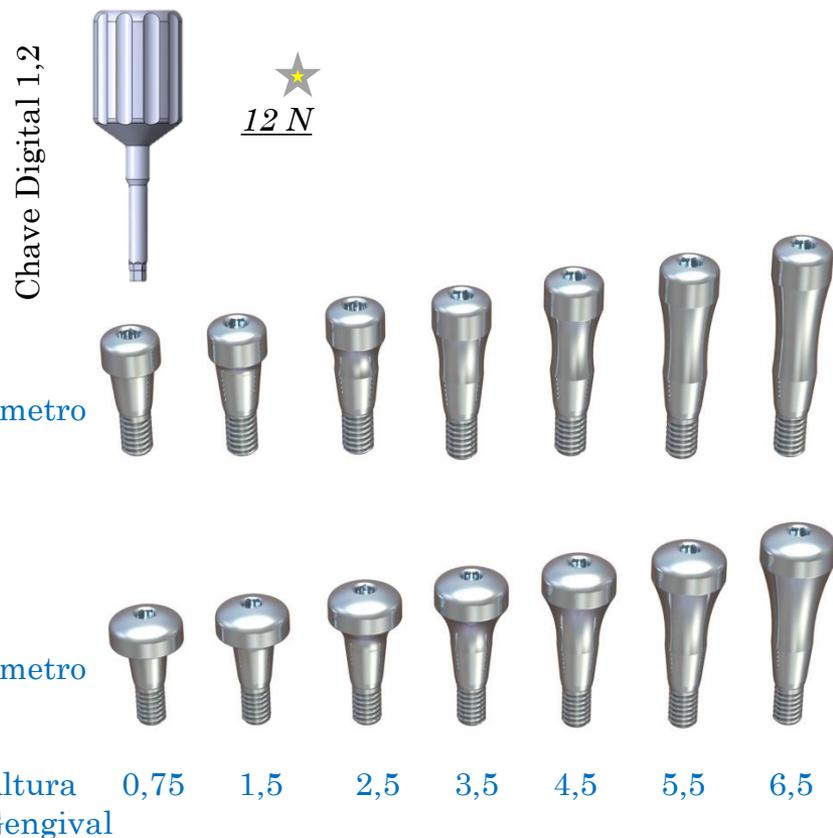

Produto	Código	Preço
Cicatrizador CM 3,3/0,80	553.03.08	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 3,3/1,5	553.03.15	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 3,3/2,5	553.03.25	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 3,3/3,5	553.03.35	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 3,3/4,5	553.03.45	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 3,3/5,5	553.03.55	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 3,3/6,5	553.03.65	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/0,80	554.03.08	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/1,5	554.03.15	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/2,5	554.03.25	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/3,5	554.03.35	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/4,5	554.03.45	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/5,5	554.03.55	R\$ 28,00
Cicatrizador CM 4,5/6,5	554.03.65	R\$ 28,00

CICATRIZADOR

6,3 MM 8,0 MM



★
15 N

6,3



8,0



Altura
Gengival

0,75

1,5

2,5

3,5


4,5

5,5

6,5

Produto	Código	Preço
Cicatrizador CM 3,3/0,80	556.03.08	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 3,3/1,5	556.03.15	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 3,3/2,5	556.03.25	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 3,3/3,5	556.03.35	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 3,3/4,5	556.03.45	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 3,3/5,5	556.03.55	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 3,3/6,5	556.03.65	R\$ 32,00
Cicatrizador CM 4,5/0,80	558.03.08	R\$ 38,00
Cicatrizador CM 4,5/1,5	558.03.15	R\$ 38,00
Cicatrizador CM 8,0/2,5	558.03.25	R\$ 38,00
Cicatrizador CM 8,0/3,5	558.03.35	R\$ 38,00
Cicatrizador CM 8,0/4,5	558.03.45	R\$ 38,00
Cicatrizador CM 8,0/5,5	558.03.55	R\$ 38,00
Cicatrizador CM 8,0/6,5	558.03.65	R\$ 38,00


TRANSFER / ANÁLOGO

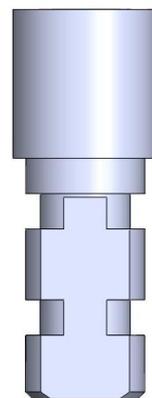


640.03.00



600.03.00

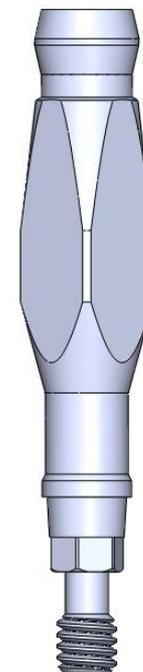

606.03.00

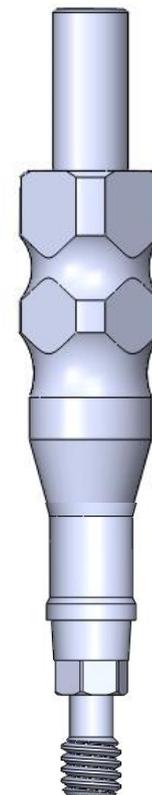


606.03.01

Produto	Código	Preço
Transfer implante moldeira fechada	600.03.00	R\$ 38,00
Transfer implante indexado moldeira fechada	606.03.00	R\$ 48,00
Transfer implante indexado moldeira aberta	606.03.01	R\$ 48,00
Análogo implante	640.03.00	R\$ 28,00

Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio

MUNHÃO UNIVERSAL

MUNHÃO UNIVERSAL INDEXADO

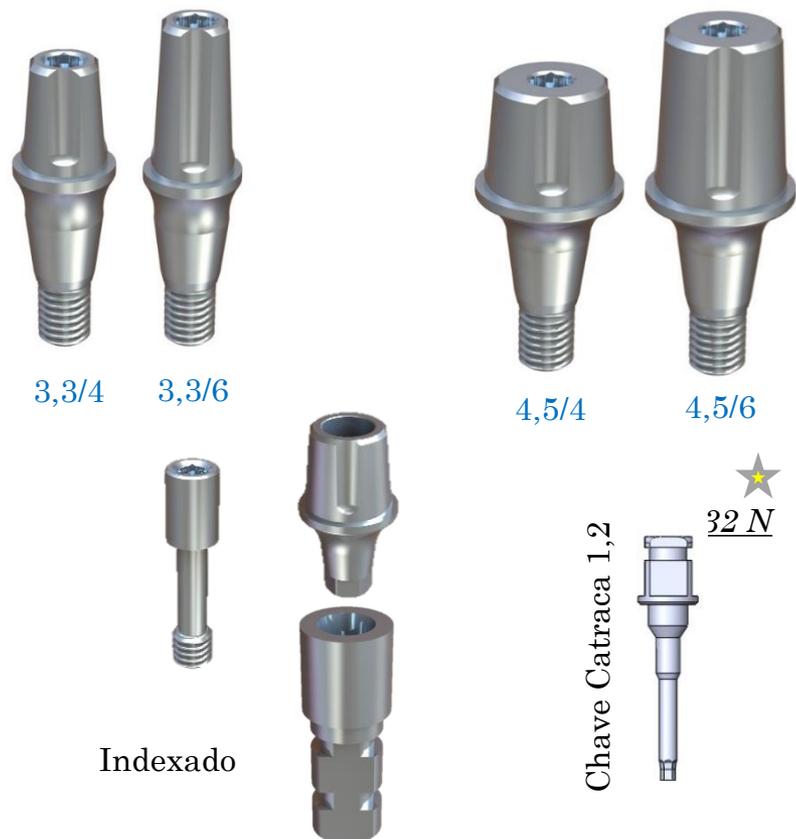

Colocação: Chave Catraca 1,2
 Remoção: Chave Extratora PCM/MCM
 Estéril: Não
 Validade: Indeterminada
 Material: Titânio

Para Coroas Unitárias Cimentadas em Boca:
 O pilar colocado sobre o implante com torque de 32N, depois feita a moldagem do munhão com moldeira fechada.

No caso do munhão universal indexado o molde pode ser do munhão ou do implante com transfer indexado.



MUNHÃO UNIVERSAL

3,3/04

3,3/06

3,3/4



3,3/6



Altura
Gengival

0,75

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Produto	Código	Preço
Munhão universal 3,3/04/0,80	210.03.08	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/04/1,5	210.03.15	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/04/2,5	210.03.25	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/04/3,5	210.03.35	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/04/4,5	210.03.45	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/04/5,5	210.03.55	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/04/6,5	210.03.65	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/0,80	211.03.08	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/1,5	211.03.15	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/2,5	211.03.25	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/3,5	211.03.35	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/4,5	211.03.45	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/5,5	211.03.55	R\$ 58,00
Munhão universal 3,3/06/6,5	211.03.65	R\$ 58,00

MUNHÃO UNIVERSAL

4,5/04 4,5/06

4,5/4



4,3/6



Altura
Gengival

0,75

1,5

2,5

3,5


4,5

5,5

6,5

Produto	Código	Preço
Munhão universal 4,5/04/0,80	212.03.08	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/04/1,5	212.03.15	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/04/2,5	212.03.25	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/04/3,5	212.03.35	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/04/4,5	212.03.45	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/04/5,5	212.03.55	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/04/6,5	212.03.65	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/0,80	213.03.08	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/1,5	213.03.15	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/2,5	213.03.25	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/3,5	213.03.35	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/4,5	213.03.45	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/5,5	213.03.55	R\$ 58,00
Munhão universal 4,5/06/6,5	213.03.65	R\$ 58,00

MUNHÃO UNIVERSA INDEXADO

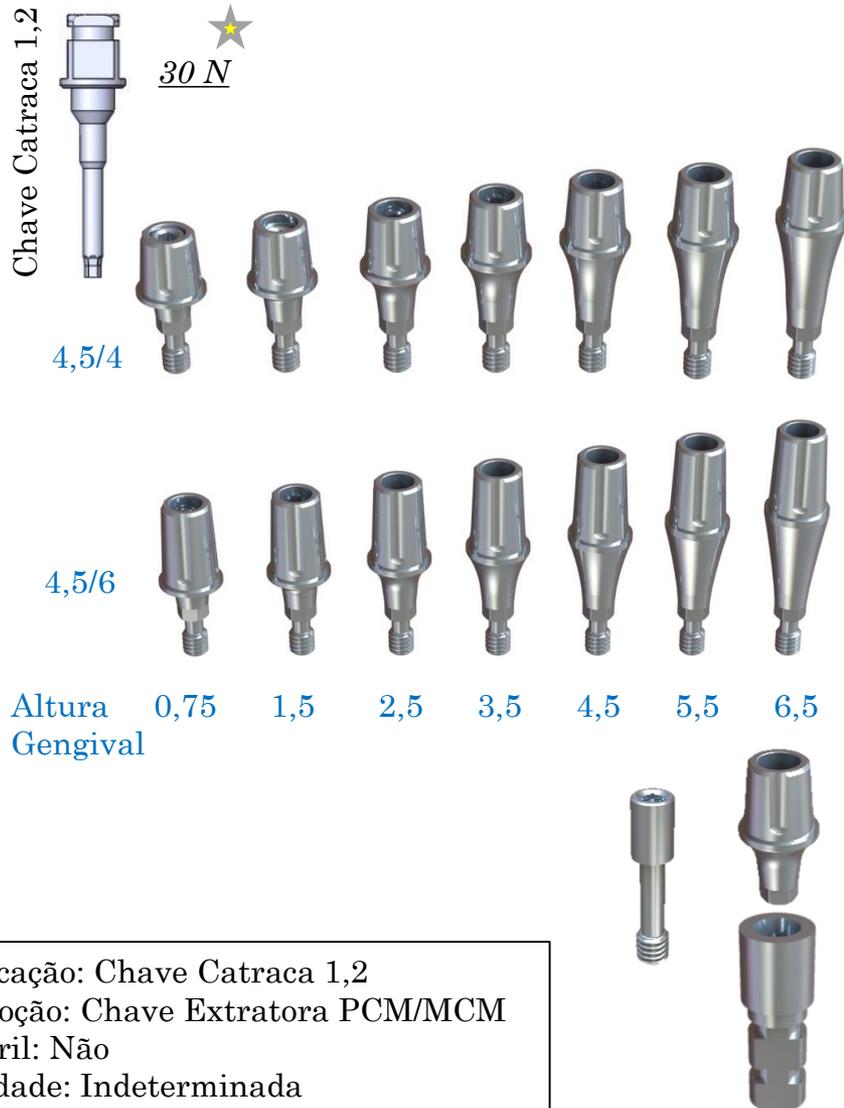

Produto	Código	Preço
M. U. Indexado 4,5/04/0,80	312.03.08	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/04/1,5	312.03.15	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/04/2,5	312.03.25	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/04/3,5	312.03.35	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/04/4,5	312.03.45	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/04/5,5	312.03.55	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/6,5	312.03.65	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/0,80	313.03.08	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/1,5	313.03.15	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/2,5	313.03.25	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/3,5	313.03.35	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/4,5	313.03.45	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/5,5	313.03.55	R\$ 68,00
M. U. Indexado 4,5/06/6,5	313.03.65	R\$ 68,00


Colocação: Chave Catraca 1,2
 Remoção: Chave Extratora PCM/MCM
 Estéril: Não
 Validade: Indeterminada
 Material: Titânio

MUNHÃO UNIVERSAL


ACESSÓRIOS



Transfer

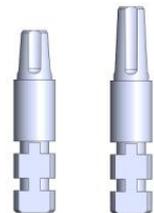

Análogo

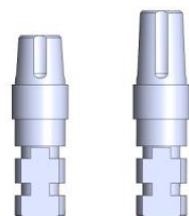

Cilindro provisório



Cilindro calcinável




3,3/4 3,3/6

4,5/4 4,5/6

Produto	Código	Preço
Transfer M. U. 3,3/04	613.210.00	R\$ 16,00
Análogo M. U. 3,3/04	640.210.00	R\$ 28,00
Cilindro Provisório M. U. 3,3/04	413.210.00	R\$ 16,00
Cilindro calcinável M. U. 3,3/04	412.210.00	R\$ 16,00
Transfer M. U. 3,3/06	613.211.00	R\$ 16,00
Análogo M. U. 3,3/06	640.211.00	R\$ 28,00
Cilindro Provisório M. U. 3,3/06	413.211.00	R\$ 16,00
Cilindro calcinável M. U. 3,3/06	412.211.00	R\$ 16,00
Transfer M. U. 4,5/04	613.212.00	R\$ 16,00
Análogo M. U. 4,5/04	640.212.00	R\$ 28,00
Cilindro Provisório M. U. 4,5/04	413.212.00	R\$ 16,00
Cilindro calcinável M. U. 4,5/04	412.212.00	R\$ 16,00
Transfer M. U. 4,5/06	613.213.00	R\$ 16,00
Análogo M. U. 4,5/06	640.213.00	R\$ 28,00
Cilindro Provisório M. U. 4,5/06	413.213.00	R\$ 16,00
Cilindro calcinável M. U. 4,5/06	412.213.00	R\$ 16,00

MUNHÃO PARAFUSO PASSANTE

MUNHÃO PARAFUSO PASSANTE INDEXADO

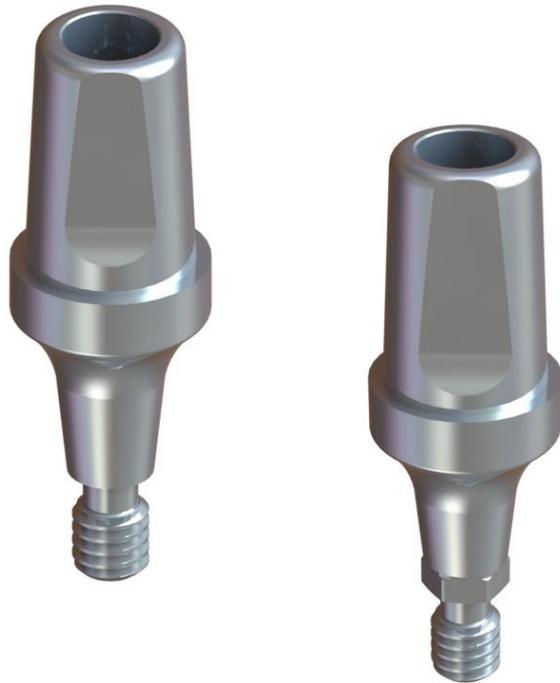


Indexado

Munhão parafuso passante indexado ou não é indicado para casos unitários que necessitam de individualização e preparo, são fácies de cortar e usar no laboratório.

As coroas podem ser cimentadas em boca ou cimentadas no laboratório e parafusadas em boca.

Sua remoção segue a mesma técnica de remoção do Munhão Universal indexado, veja a seguir.

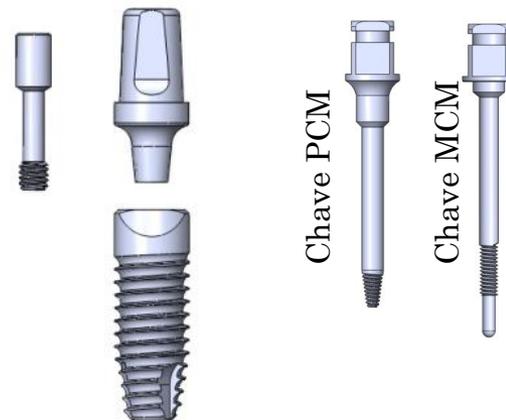


Colocação: Chave Catraca 1,2
Remoção: Chave Extratora PCM/MCM
Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio

MUNHÃO PARAFUSO PASSANTE

Chave Catraca 1,2



★
30 N

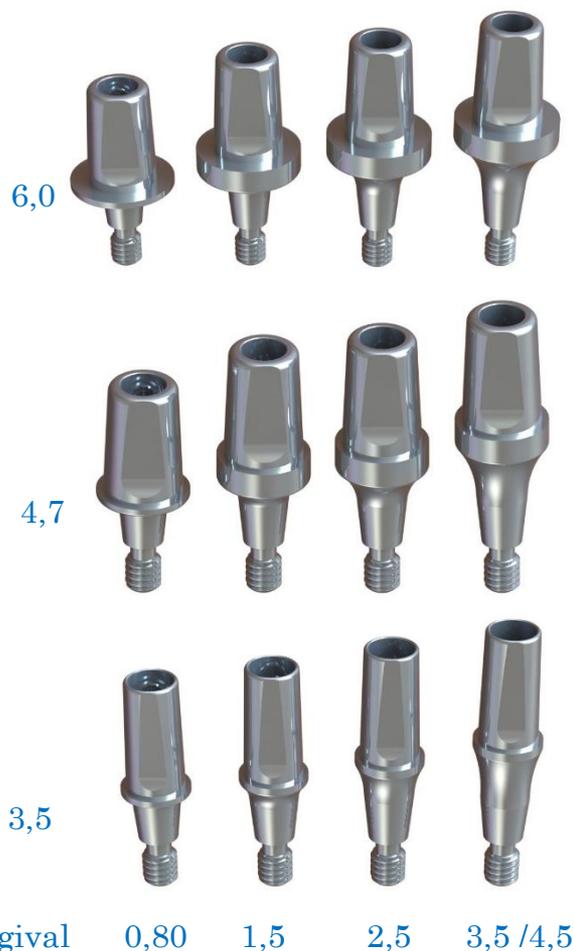

Altura gengival

0,80

1,5

2,5

3,5/4,5

Produto	Código	Preço
Munhão P.P. 3,5/0,80	314.03.08	R\$ 68,00
Munhão P.P. 3,5/1,5	314.03.15	R\$ 68,00
Munhão P.P. 3,5/2,5	314.03.25	R\$ 68,00
Munhão P.P. 3,5/3,5	314.03.35	R\$ 68,00
Munhão P.P. 3,5/4,5	314.03.45	R\$ 68,00
Munhão P.P. 4,7/0,80	315.03.08	R\$ 68,00
Munhão P.P. 4,7/1,5	315.03.15	R\$ 68,00
Munhão P.P. 4,7/2,5	315.03.25	R\$ 68,00
Munhão P.P. 4,7/3,5	315.03.35	R\$ 68,00
Munhão P.P. 4,7/4,5	315.03.45	R\$ 68,00
Munhão P.P. 6,0/0,80	316.03.08	R\$ 68,00
Munhão P.P. 6,0/1,5	316.03.15	R\$ 68,00
Munhão P.P. 6,0/2,5	316.03.25	R\$ 68,00
Munhão P.P. 6,0/3,5	316.03.35	R\$ 68,00
Munhão P.P. 6,0/4,5	316.03.45	R\$ 68,00


MUNHÃO PARAFUSO PASSANTE INDEXADO



Altura gengival 0,80 1,5 2,5 3,5 / 4,5


Produto	Código	Preço
Munhão P.P. indexado 3,5/0,80	317.03.08	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 3,5/1,5	317.03.15	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 3,5/2,5	317.03.25	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 3,5/3,5	317.03.35	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 3,5/4,5	317.03.45	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 4,7/0,80	318.03.08	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 4,7/1,5	318.03.15	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 4,7/2,5	318.03.25	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 4,7/3,5	318.03.35	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 4,7/4,5	318.03.45	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 6,0/0,80	319.03.08	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 6,0/1,5	319.03.15	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 6,0/2,5	319.03.25	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 6,0/3,5	319.03.35	R\$ 68,00
Munhão P.P. indexado 6,0/4,5	319.03.45	R\$ 68,00

PILAR HEXAGONAL CM TIPO GT

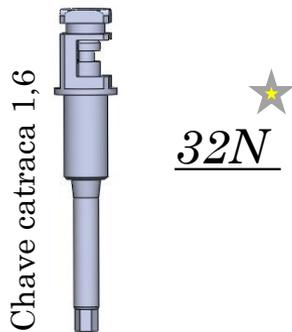

Transfer

Análogo

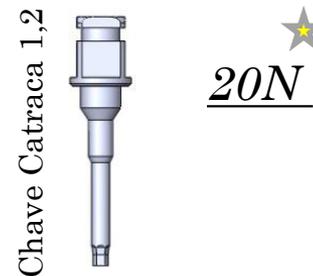


Indicado para coroas unitárias parafusadas.
O pilar é colocado com a chave 1,6 com torque 32N.
A prótese é colocada com a chave 1,2 com torque 20N.

Colocação: Chave Catraca 1,6
Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio

PILAR HEXAGONAL CM

TIPO GT

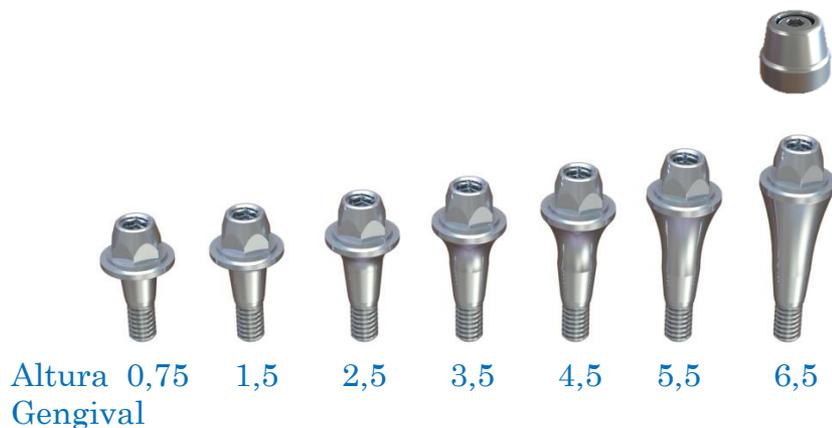


Produto	Código	Preço
Pilar Hexagonal CM 0,80	202.03.08	R\$ 58,00
Pilar Hexagonal CM 1,5	202.03.15	R\$ 58,00
Pilar Hexagonal CM 2,5	202.03.25	R\$ 58,00
Pilar Hexagonal CM 3,5	202.03.35	R\$ 58,00
Pilar Hexagonal CM 4,5	202.03.45	R\$ 58,00
Pilar Hexagonal CM 5,5	202.03.55	R\$ 58,00
Pilar Hexagonal CM 6,5	202.03.65	R\$ 58,00
Protetor pilar CM	554.202.00	R\$ 38,00

PILAR HEXAGONAL CM


TIPO GT

ACESSÓRIOS

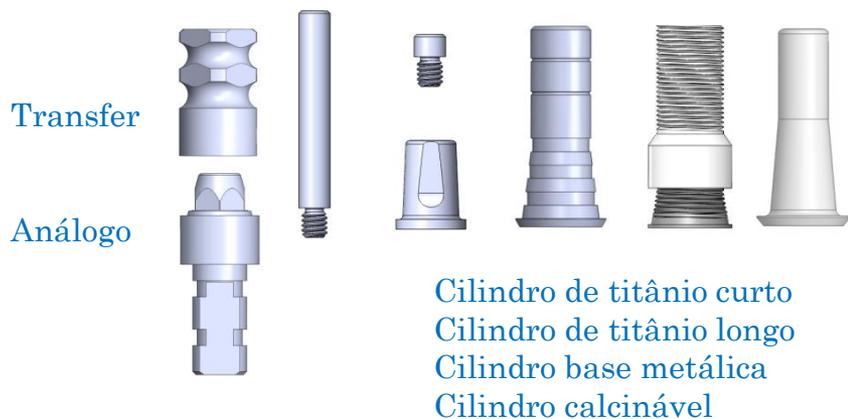

Produto	Código	Preço
Transfer moldeira fechada pilar CM	606.202.00	R\$ 48,00
Transfer moldeira aberta pilar CM	606.202.01	R\$ 48,00
Análogo pilar CM	640.202.00	R\$ 28,00
Cilindro Ti curto pilar CM Indexado	404.202.05	R\$ 48,00
Cilindro Ti longo pilar CM Indexado	404.202.12	R\$ 48,00
Cilindro calcinável pilar CM Indexado	412.202.00	R\$ 24,00
Cilindro base metálica pilar CM Indexado	414.202.00	RS 68.00
Parafuso de fixação curto	660.202.00	R\$ 12,00
Parafuso de trabalho	663.202.00	R\$ 12,00

MINI PILAR

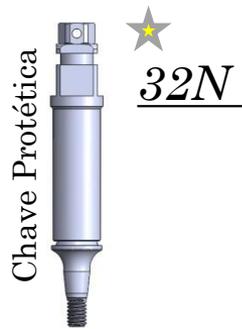

Indicado para prótese múltipla parafusada.
O pilar é colocado com a chave protética com torque 32N.

Colocação: Chave Catraca Protética
Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio




Transfer moldeira Aberta



Transfer moldeira Fechada



Análogo

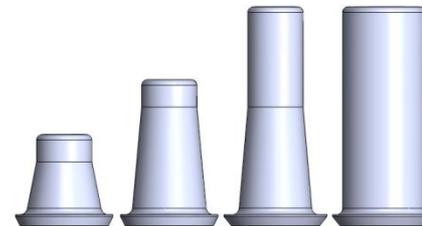

Cilindro de titânio:
Curto, médio, longo e maciço



Parafuso de fixação:
Curto, médio e longo
Parafuso de trabalho



Cilindro calcinável
Cilindro base metálica

MINI PILAR



Altura 0,80
Gengival

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Produto	Código	Preço
Mini pilar 0,80	200.03.08	R\$ 58,00
Mini pilar 1,5	200.03.15	R\$ 58,00
Mini pilar 2,5	200.03.25	R\$ 58,00
Mini pilar 3,5	200.03.35	R\$ 58,00
Mini pilar 4,5	200.03.45	R\$ 58,00
Mini pilar 5,5	200.03.55	R\$ 58,00
Mini pilar 6,5	200.03.65	R\$ 58,00
Protetor mini pilar	554.200.00	R\$ 38,00

MINI PILAR


ACESSÓRIOS




Transfer moldeira fechada
Transfer moldeira aberta normal
Transfer moldeira aberta curto




Análogo

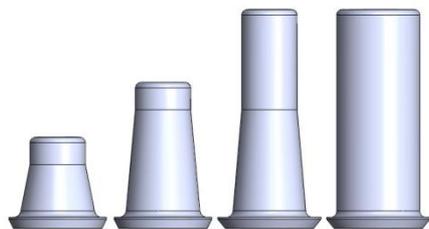

Cilindro de titânio:
Curto, médio, longo e maciço

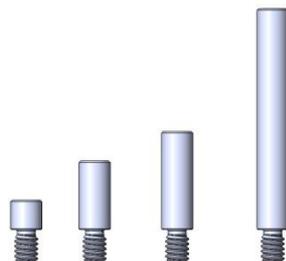

Parafuso de fixação:
Curto, médio e longo
Parafuso de trabalho

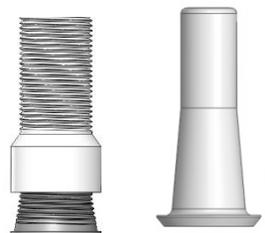

Cilindro calcinável
Cilindro base metálica

Produto	Código	Preço
Transfer MP moldeira fechada .	603.200.00	R\$ 48,00
Transfer MP moldeira aberta normal	603.200.01	R\$ 48,00
Transfer MP moldeira aberta curto	603.200.02	R\$ 48,00
Análogo MP	640.200.00	R\$ 28,00
Cilindro Titânio MP curto	400.200.05	R\$ 32,00
Cilindro Titânio MP médio	400.200.09	R\$ 36,00
Cilindro Titânio MP longo	400.200.12	R\$ 38,00
Cilindro Titânio MP solido	400.200.13	R\$ 48,00
Parafuso MP curto	660.200.00	R\$ 12,00
Parafuso MP médio	661.200.00	R\$ 12,00
Parafuso MP longo	662.200.00	R\$ 12,00
Parafuso MP trabalho	663.200.00	R\$ 12,00
Cilindro calcinável MP	401.200.00	R\$ 24,00
Cilindro base metálica MP	402.200.00	R\$ 68,00

Obs.

- Transfer acompanha parafuso
- Cilindro acompanha parafuso

MICRO PILAR

Chave Protética

★
32N




Indicado para prótese múltipla parafusada e prótese unitária parafusada

Para prótese unitária deve usar o conjunto transfer, análogo e cilindro indexados.

Parafuso de fixação é o mesmo do mini pilar

Colocação: Chave Catraca Protética.
Estéril: Não
Validade: Indeterminada
Material: Titânio

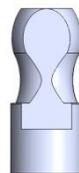

Transfer e análogo para prótese múltipla



Transfer e análogo para prótese unitária



Cilindro de titânio longo para prótese múltipla
Cilindro de titânio curto para prótese unitária



Cilindro calcinável
Cilindro base metálica
Cilindro base metálica indexado


MICRO PILAR



Produto	Código	Preço
Micro pilar 0,80	201.03.08	R\$ 58,00
Micro pilar 1,5	201.03.15	R\$ 58,00
Micro pilar 2,5	201.03.25	R\$ 58,00
Micro pilar 3,5	201.03.35	R\$ 58,00
Micro pilar 4,5	201.03.45	R\$ 58,00
Micro pilar 5,5	201.03.55	R\$ 58,00
Micro pilar 6,5	201.03.65	R\$ 58,00
Protetor micro pilar	554.201.00	R\$ 38,00

MICRO PILAR

ACESSÓRIOS

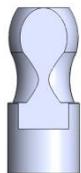

Transfer e análogo para
prótese múltipla



Transfer e análogo para
prótese unitária



Cilindro de titânio curto para prótese unitária

Cilindro de titânio longo para prótese múltipla

Cilindro base metálica

Cilindro base metálica indexado

Cilindro calcinável

Produto	Código	Preço
Transfer Micro Pilar	603.201.00	R\$ 48,00
Transfer Micro Pilar Indexado	606.201.01	R\$ 48,00
Análogo MP	640.201.00	R\$ 28,00
Análogo Micro Pilar Indexado	641.201.00	R\$ 28,00
Cilindro Ti Micro pilar	400.201.12	R\$ 38,00
Cilindro Ti Micro Pilar Indexado	404.200.05	R\$ 48,00
Cilindro Calcinável Micro pilar	401.201.00	R\$ 48,00
Cilindro Base Metálica Micro Pilar	402.201.00	R\$ 108,00
Cilindro Base Metálica Micro Pilar Indexado	412.201.00	R\$ 108,00
Parafuso MP curto	660.200.00	R\$ 12,00
Parafuso MP médio	661.200.00	R\$ 12,00
Parafuso MP longo	662.200.00	R\$ 12,00
Parafuso MP trabalho	663.200.00	R\$ 12,00

MUNHÃO PARAFUSADO


Instrução para Colocação e Remoção

Chave Catraca 1,2



Chave: PCM

MCM

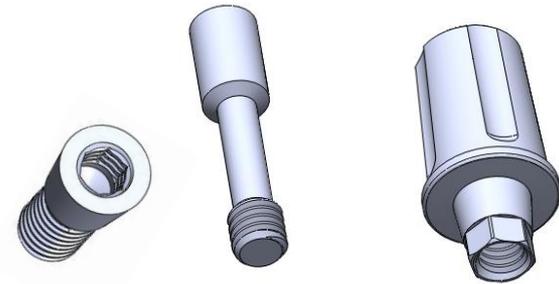

Os Munhões CM da DIRI são colocados com a chave 1,2 com torque de 32N.

Para remover, usar a chave 1,2 inicialmente, depois faz se a captura do parafuso de fixação com auxílio da chave PCM, após a remoção do parafuso do interior do munhão por completo usa se a chave MCM para remover o próprio munhão, normalmente o torque usado nesse momento é bem baixo mesmo com travamento do munhão dentro do implante.

Colocação: Chave Catraca 1,2

Remoção: Chave Extratora PCM/MCM

Estéril: Não

Validade: Indeterminada

Material: Titânio

MUNHÃO PARAFUSADO


Instrução para Colocação e Remoção

Chave PCM





Colocação com a chave 1,2 / torque 30N

Captura do parafuso por completo com a chave PCM

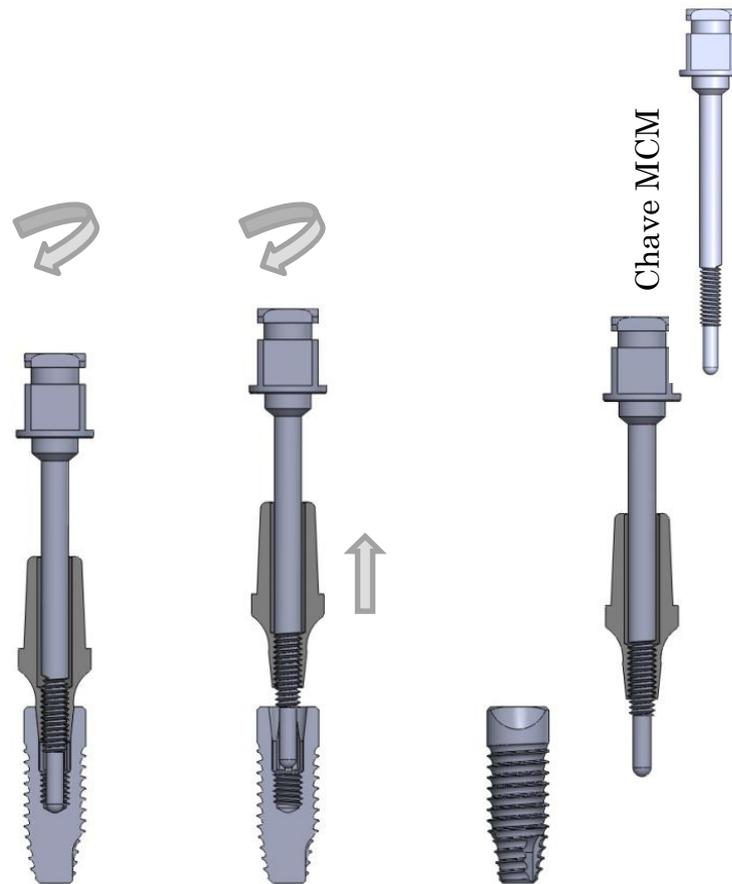


Remoção do munhão com a chave MCM

TRANSFER MINI PILAR

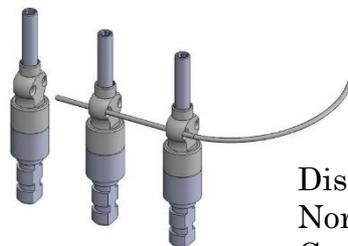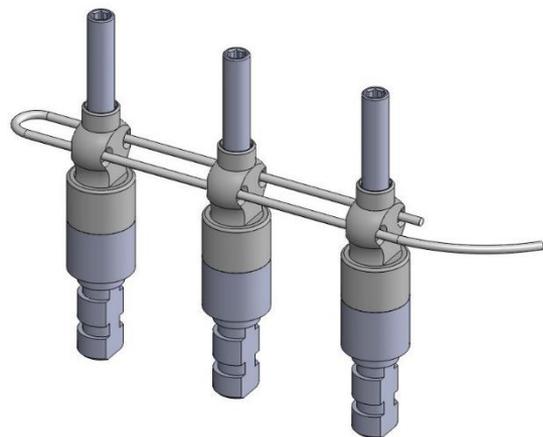

Disponível em 2 tamanhos
Normal:
Curto: Para espaço limitado.

Parafusos em diferentes tamanhos para antes e depois de registrar a mordida


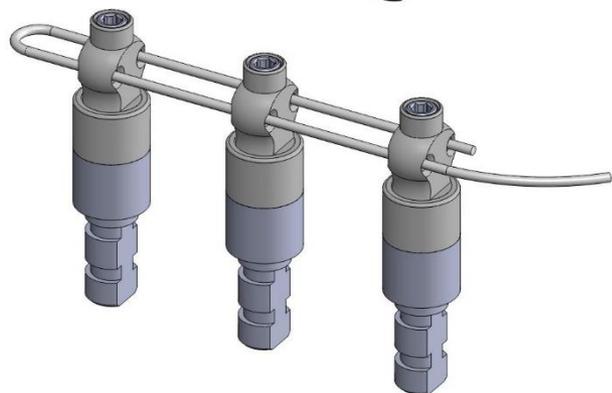


Cortesia Dr. Karam




A união entre os transfers é feita com Superfloss de forma passiva, sem a necessidade de trançá-lo e fazer nós, esse fio, por sua vez, forma um berço para receber oacrílico tipo (Pattern)

TRANSFER MINI PILAR

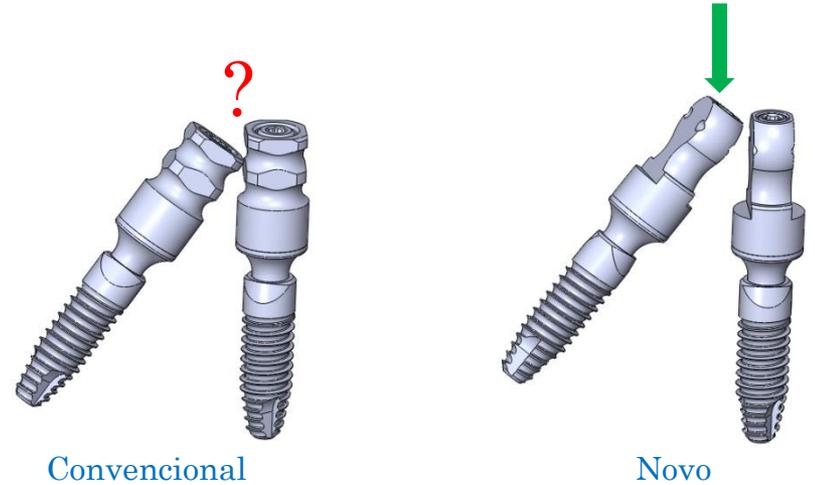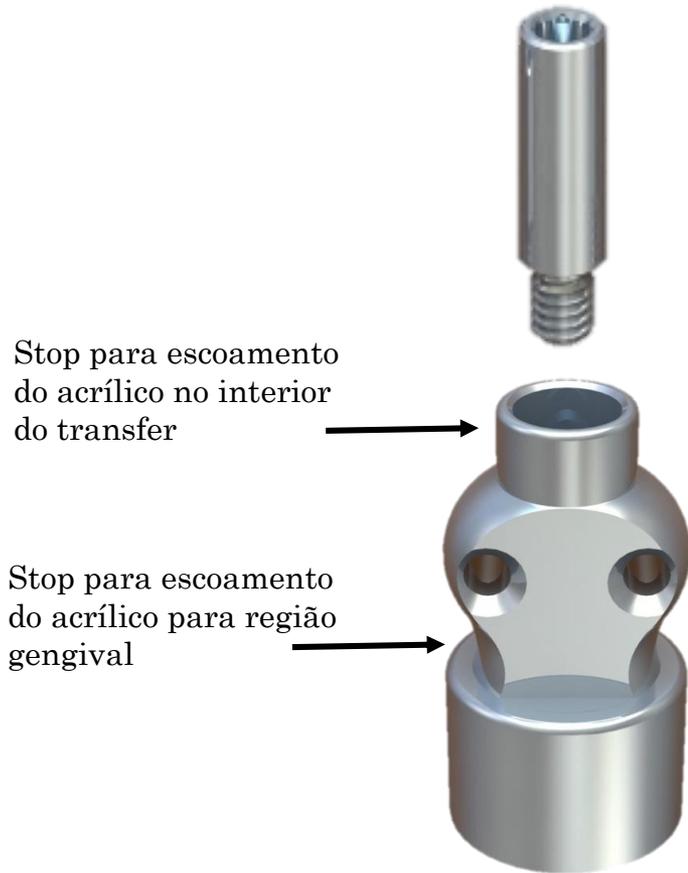

Anatomia favorável em caso de posição inclinada do implante.

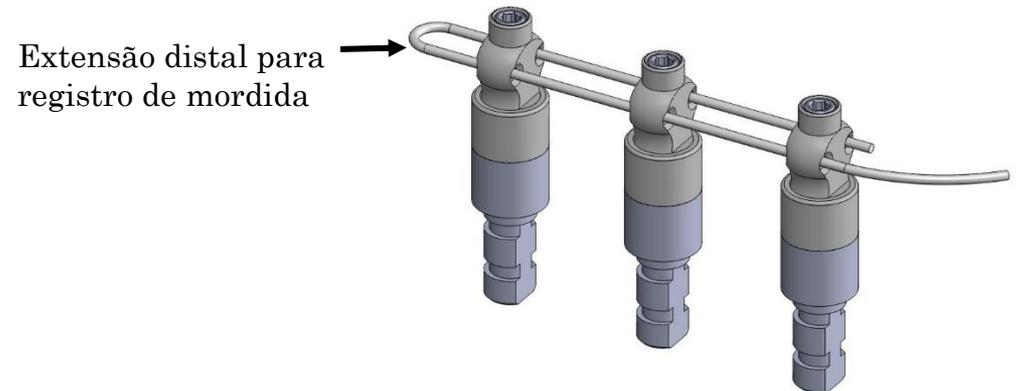

DEMONSTRAÇÃO MOLDAGEM DE TRANSFERÊNCIA E PROVISÓRIA


Moldagem de transferência do mini pilar (transfer furo lateral)




- VANTAGEM:**
- Precisão
 - Economia de tempo
 - Praticidade
 - Conforto



PROVISÓRIO MÚLTIPLO SOBRE IMPLANTE

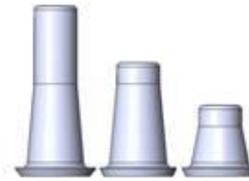

03 tamanhos do cilindro do mini pilar em titânio

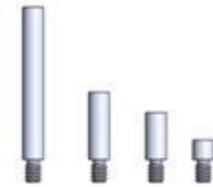

04 tamanhos do parafuso em titânio



Modelo de gesso



Enceramento com dente de estoque



Muralha de silicone



Prova dos cilindros




Cilindro tamanho médio foi escolhido com parafuso de trabalho longo.



Prensagem da resina acrílica

PROVISÓRIO MÚLTIPLO SOBRE IMPLANTE

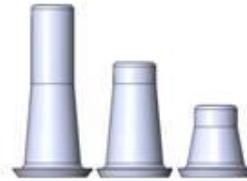

03 tamanhos do cilindro do mini pilar em titânio



04 tamanhos do parafuso em titânio



Prensagem da resina acrílica



Resultado da prensagem da resina acrílica



Inicial



Final

Provisório em boca fixado com parafuso médio e médio curto

VANTAGEM:

- O tamanho correto do cilindro deixa o canal do furo totalmente em metal.
- O tamanho correto do parafuso evita uma fixação profunda, em alguns casos, usar o parafuso pequeno exige uma chave muito longa podendo ter problemas com a abertura da boca e a qualidade da fixação.



Termo de Responsabilidade e garantia.

A empresa DENTAL IMPLANT RESEARCH INSTITUTE LTDA., representada por seu responsável legal e técnico WAIL AL HOUCH, abaixo assinado, assume a responsabilidade técnica e legal pelos produtos da empresa e que todas as informações, prestadas referente a esses produtos, contidas nos formulários divulgados pela empresa, são verdadeiras.

A empresa DENTAL IMPLANT RESEARCH INSTITUTE LTDA. assegura, ao USUÁRIO deste produto, garantia permanente contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar, se transportado, armazenado e acondicionado adequadamente de acordo com Instruções de Uso, o produto terá validade indeterminada.

Responsável Técnico
WAIL AL HOUCH

Representante Legal
WAIL AL HOUCH CRO 2553